



Modulare Hüftrevision

Premiumversorgung



■ **Modulare Komponenten**



Dehnschrauben
41 + 61 mm



Prothesenköpfe A
BIOLOX® forte*
3 KH-Längen
Ø 28, 32, 36 mm



Prothesenköpfe A
BIOLOX® delta*
3 KH-Längen
Ø 28, 32, 36 mm



Prothesenköpfe B
CoCrMo-Legierung
4 KH-Längen
Ø 28 + 32 mm

Schäfte und Halsteile stehen mit mikroporöser Oberfläche (Rt 70 µm) oder einer HX®-Beschichtung (Kalziumphosphat**) zur Verfügung. Eine Auswahl von Revisions-Schäften ist auch als zementierbare Version aus CoCrMo-Legierung erhältlich (Nicht abgebildet).
** *Ti/otan*® TiAl6V4 + CaP



Zusätzliche Halsteile




Mit Kragen
in 65 + 35 mm



XXL ohne und mit Kragen
je in 65 + 35 mm

Halsteile ohne Kragen
in 65 + 35 mm, 35-mm-Halsteile nur zur Verwendung **ohne** Zwischenringe

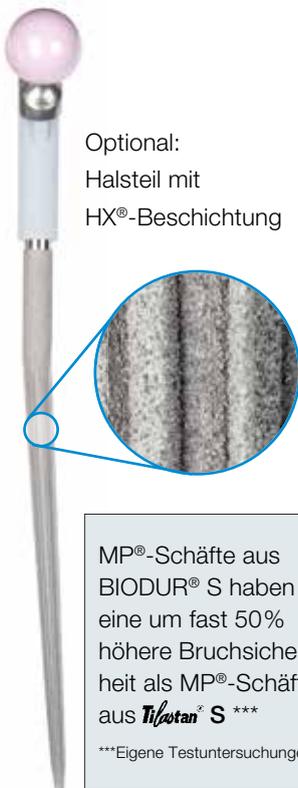

Optional:
Halsteil mit HX®-Beschichtung

MP®-Schäfte aus BIODUR® S haben eine um fast 50% höhere Bruchsicherheit als MP®-Schäfte aus *Ti/otan*® S ***
***Eigene Testuntersuchungen

Zwischenringe
10 + 20 mm



160 mm
nur zur Verwendung mit 35-mm-Halsteil und **ohne** Zwischenringe



180 mm



210 mm



250 mm



290 mm



330 mm

MP® BIODUR® S

Schäfte aus CoCrMo-Schmiedelegerung mit PlasmaLink Titanbeschichtung

Schäfte aus *Ti/otan*® S

- **Schaft-Ø mm:** 14, 16, 18, 20, 22.5, 25
- **Länge:** 160-330 mm
- **Schaft-Ø mm:** 12, **Längen:** 160-250 mm

■ CombiCup R®

■ Metallträger

CombiCup R®

Material: Ti + PoroTi



- Titan mit poröser Titanbeschichtung
- 5 Größen, Außendurchmesser 50 - 66 mm
- Neutrale, gewinkelte und lateralisierende Einsatz-Augmente für anatomische Rekonstruktion
- Einsätze aus BIOLOX® delta* Keramik, UHMWPE und X-PE**-Einsätze
- Einsätze mit Schulter (UHMWPE und X-PE**)

■ Einsätze und Augmente für CombiCup® Metallträger

Neutrale PE Einsätze

Materialien: UHMWPE + TiAl6V4
UHMWPE crosslinked + TiAl6V4



Keramik Einsätze

Material: BIOLOX® delta*



PE Einsätze mit Schulter

Überdachung der Schulter ca. 7 mm
Materialien: UHMWPE + TiAl6V4
UHMWPE crosslinked + TiAl6V4



Augmente

Material: TiAl6V4



■ Pfahlschrauben für CombiCup®

Pfahlschrauben

Material: TiAl6V4



Hinweis: CombiCup® PE Pfanneneinsätze (UHMWPE und X-PE) können mit LINK® Hüftprothesenköpfen Typ A und Typ B kombiniert werden. BIOLOX® delta* Einsätze dürfen ausschließlich mit Prothesenköpfen aus BIOLOX® forte* oder delta* kombiniert werden. Eine Kombination mit Metall-Köpfen oder Fremdfabrikaten darf nicht vorgenommen werden.

*BIOLOX® forte und delta sind Produkte der CeramTec GmbH, Plochingen



Waldemar Link GmbH & Co. KG

Barkhausenweg 10 · 22339 Hamburg
Postfach 63 05 52 · 22315 Hamburg
Telefon: +49 40 53995-0 · Fax: +49 40 5386929
E-Mail: info@linkhh.de · www.linkorthopaedics.com

LINK[®]

